

Ürün Bilgisi

Aligo XT 9|7|5 miniRITE T

Aligo XT, Live Processing Technology'yi yeni bir seviyeye taşır. miniRITE T, hafif dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kayıplı kullanıcılar için tasarlanmış, hoparlörü kulak içinde olan bir işitme cihazıdır. Ses seviyesi ve program değişimi için bir çift basma

düğmesi, bir telecoil, doğrudan ses akışı, 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy ve NFMI teknolojisi içerir. miniRITE T, dört güç seviyesi, çeşitli kubbeler ve kişisel kalıpları içeren miniFit hoparlör sistemi ile birlikte sunulur.

60-Hoparlör



AOXT 9|7|5 MNR T

85-Hoparlör



AOXT 9|7|5 MNR T

100-Hoparlör



AOXT 9|7|5 MNR T





105-Hoparlör



AOXT 9|7|5 MNR T

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

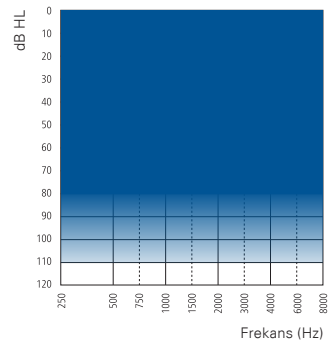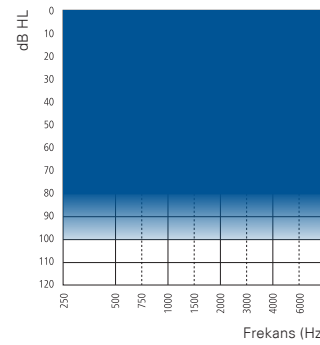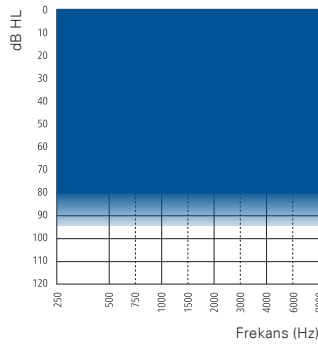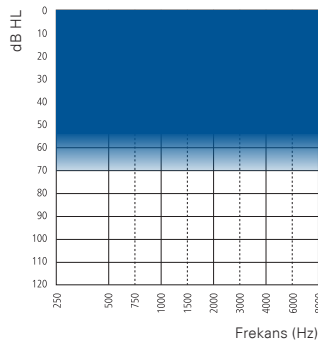

Teknik Özellikler

- Doğrudan ses akışı (iOS ve Android™ cihazlarla uyumlu)
- Hands-free iletişim*
- 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy
- NFMI (yakın alan manyetik indüksiyon)
- Çift basma düğmesi
- Telecoil
- miniFit hoparlörler
- Hidrofobik kaplama
- IP68 onaylı
- LED gösterge

Aksesuarlar

- RemoteLink 2 App (iOS ve Android cihazlarla uyumlu)
- RC-A (uzaktan kumanda)
- TV-A (TV adaptörü)
- SoundClip-A
- Noahlink Wireless (kablosuz programlama arayüzü)

Genel özellikler

- Dijital Programlanabilir
- Otomatik veya Manüel Ses Seviyesi Kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Güç Çıkışı
- GC-Kazanç Kontrolü
- AGC-Otomatik Kazanç Kontrolü
- Gürültü Azaltma
- Feedback Yönetimi
- Çift Mikrofon
- FM uyumlu (Telecoil ile)
- 4 Program
- 64 Kanala kadar**

* FW 1.0'ten itibaren seçili iPhone ve iPad modellerinde mevcuttur.

** Aligo XT 9: 64 kanal, Aligo XT 7&5: 48 kanal

Aligo XT bir Made for iPhone, iPad, iPod işitme cihazıdır. Android cihazlar için Doğrudan Ses Akışı; Android 10 veya üstü, Bluetooth® 5.0 ve Android cihazda Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) özelliğinin varlığını gerektirir. Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen bakınız: www.maicoitalia.com/apparecchi-acustici/connettivita

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, iPod ve iPod touch Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.



Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Demant A/S tarafından kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.

UYARI: Bu ekipman üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

Aligo XT 9 miniRITE T



— 60-Hoparlör --- 85-Hoparlör - - - 100-Hoparlör — 105-Hoparlör

2CC COUPLER

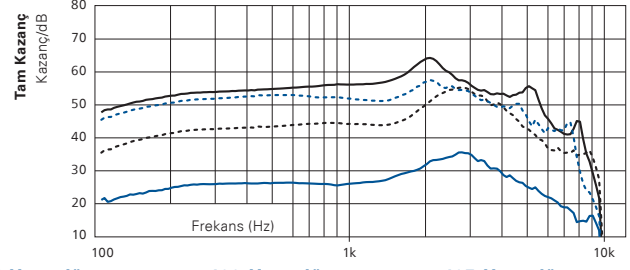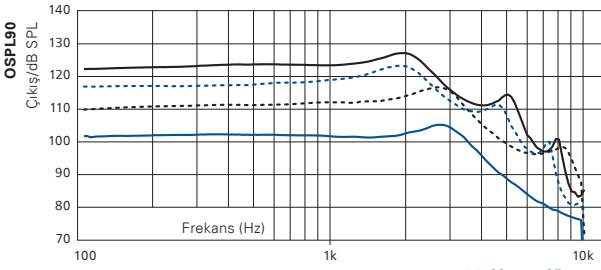

	60-Hoparlör	85-Hoparlör	100-Hoparlör	105-Hoparlör
OSPL90, Tepe (dB SPL)	105	117	123	127
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	113	122	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	114	119	123
Tam Kazanç, Tepe (dB)	36	55	57	64
Tam Kazanç, 1600 Hz (dB)	29	45	53	59
Tam Kazanç, HFA (dB)	30	48	53	58
Referans test kazancı (dB)	26	37	42	47
Durağan akım (mA)	2.2	2.2	2.2	2.2
Çalışma akımı (mA)	2.2	2.4	2.4	2.4
Pil	312	312	312	312
Distorsion 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekans aralığı (Hz)	100-9400	100-8900	100-7500	100-7900
Eşdeğer Girdi Gürültüsü (dB SPL) ¹	16	17	16	16
Telecoil 1 mA/m 1000 Hz, ANSI (dB SPL)	58	76	85	87
Telecoil HFA SPLITS (dB SPL)	85	96	101	106

KULAK SİMÜLATÖRÜ

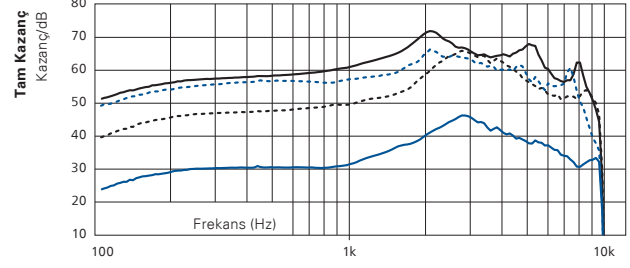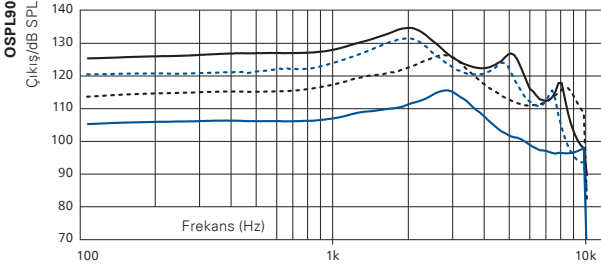

	60-Hoparlör	85-Hoparlör	100-Hoparlör	105-Hoparlör
OSPL90, Tepe (dB SPL)	116	127	132	135
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	121	130	133
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	122	127	131
Tam Kazanç, Tepe (dB)	46	66	66	72
Tam Kazanç, 1600 Hz (dB)	37	53	60	66
Tam Kazanç, HFA (dB)	38	56	61	65
Referans test kazancı (dB)	30	46	53	58
Durağan akım (mA)	2.2	2.2	2.2	2.2
Çalışma akımı (mA)	2.3	2.4	2.2	2.3
Pil	312	312	312	312
Distorsion 500/800/1600 Hz (%)	<2/<3/<2	<2/<4/<5	<9/<6/<3	<4/<4/<4
Frekans aralığı (Hz)	100-9600	100-9500	100-8900	100-9100
Eşdeğer Girdi Gürültüsü (dB SPL) ¹	18	21	17	15
Telecoil 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	68	84	91	96

¹ Test kutusu ölçüm ayarlarına göre, teknik veriler geniş kapsamda ölçülmüştür.

IEC 60318-5:2006 'ya uygun bir "2cc" coupler'e göredir. "Kulak simülatörü", IEC 60318-4:2010'a uygun bir coupler'e göredir.

Uygulanan versiyonlar: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.



Tam kazanç, işitme cihazlarının kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20 dB ayarına göre ve 70 dB'lık bir SPL girdisiyle ölçülmüştür.

Bu, ör. IEC 60118-0+A1:1994'ten, feedback etkisi olmadan tam kazanç eşdeğer bir kazanç tepkisi elde etmek içindir.

İşitme cihazı dağıtıcısına uyarı



İşitme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC711). İşitme cihazı kullanıcısının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında özel bir özen gösterilmelidir.

2CC COUPLER

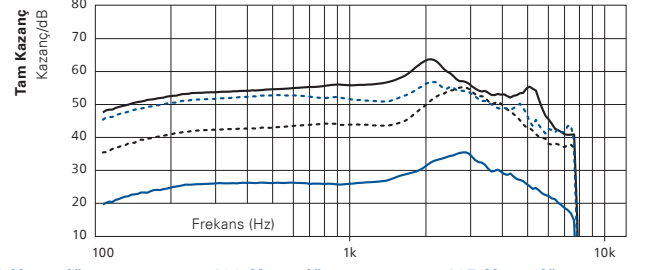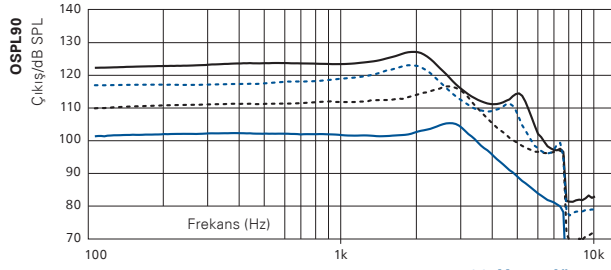

	60-Hoparlör	85-Hoparlör	100-Hoparlör	105-Hoparlör
OSPL90, Tepe (dB SPL)	105	117	123	127
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	113	122	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	114	119	123
Tam Kazanç, Tepe (dB)	36	55	57	64
Tam Kazanç, 1600 Hz (dB)	29	45	53	59
Tam Kazanç, HFA (dB)	30	48	53	58
Referans test kazancı (dB)	26	37	42	47
Durağan akım (mA)	2.2	2.2	2.2	2.2
Çalışma akımı (mA)	2.2	2.4	2.3	2.4
Pil	312	312	312	312
Distorsion 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekans aralığı (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Eşdeğer Girdi Gürültüsü (dB SPL) ¹	16	17	16	16
Telecoil 1 mA/m 1000 Hz, ANSI (dB SPL)	58	77	85	88
Telecoil HFA SPLITS (dB SPL)	85	96	101	106

KULAK SİMÜLATÖRÜ

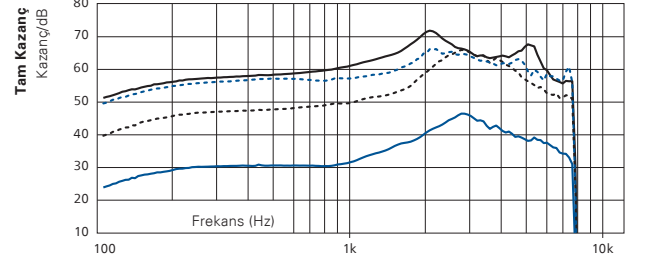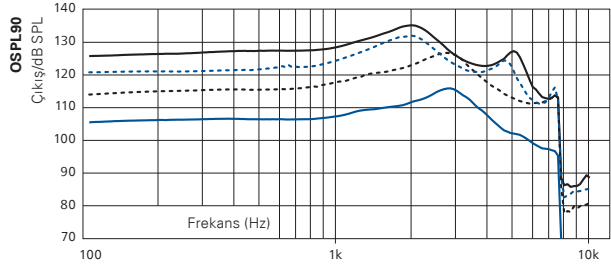

	60-Hoparlör	85-Hoparlör	100-Hoparlör	105-Hoparlör
OSPL90, Tepe (dB SPL)	116	127	132	135
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	121	130	133
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	122	127	131
Tam Kazanç, Tepe (dB)	46	66	66	72
Tam Kazanç, 1600 Hz (dB)	37	53	60	66
Tam Kazanç, HFA (dB)	38	56	61	65
Referans test kazancı (dB)	30	46	53	58
Durağan akım (mA)	2.2	2.2	2.2	2.2
Çalışma akımı (mA)	2.2	2.3	2.2	2.3
Pil	312	312	312	312
Distorsion 500/800/1600 Hz (%)	<2/<3/<2	<2/<4/<5	<9/<6/<3	<4/<4/<4
Frekans aralığı (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Eşdeğer Girdi Gürültüsü (dB SPL) ¹	18	21	16	15
Telecoil 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	68	84	91	96

¹) Test kutusu ölçüm ayarlarına göre, teknik veriler geniş kapsamda ölçülmüştür.

IEC 60318-5:2006 'ya uygun bir "2cc" coupler'e göredir. "Kulak simülatörü", IEC 60318-4:2010'a uygun bir coupler'e göredir.

Uygulanan versiyonlar: IEC 60118-0/A1:1994, IEC 60118-1/A1:1998, IEC 60118-7:2005, ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015.

Tam kazanç, işitme cihazlarının kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20 dB ayarına göre ve 70 dB'lık bir SPL girdisiyle ölçülmüştür.

Bu, örneğin IEC 60118-0+A1:1994'ten, feedback etkisi olmadan tam kazanç eşdeğer bir kazanç tepkisi elde etmek içindir.

İşitme cihazı dağıtıcısına uyarı

İşitme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC711). İşitme cihazı kullanıcısının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında özel bir özen gösterilmelidir.

	Aligo XT 9	Aligo XT 7	Aligo XT 5
Live Technology™			
Live Sound Processing™	•	•	•
Frekans Bant Genişliği	10 kHz	8 kHz	8 kHz
Live Balancing™	•	•	-
Konuşma Dengeleyici	3 Seçenek	2 Seçenek	•
Gürültü Dengeleyici	4 Seçenek	2 Seçenek	-
Live Noise Management™	•	•	•
Akıllı Gürültü Azaltma	4 Seçenek	4 Seçenek	3 Seçenek
Akıllı Direksiyonalite	4 Seçenek	4 Seçenek	4 Seçenek
Dinamik Durumlar	3 Seçenek	2 Seçenek	-
Çok Yönlü Durumlar	2 Seçenek	2 Seçenek	-
Live Feedback Canceller™	•	•	•
Live Sound Care™	•	•	•
Rüzgar Temas Gürültüsü Koruyucusu	•	•	•
Konuşma			
Alçak Frekans Arttırıcı	•	•	•
Frequency Composition ^{next}	•	•	•
Konfor			
Binaural Gürültü Yönetimi	•	•	-
Geçici Gürültü Azaltma	6 Seçenek	5 Seçenek	4 Seçenek
Dinamik Alan Genişletici	•	•	-
Hafif Gürültü Yöneticisi	•	•	•
Direksiyonalite Kontrolleri			
Dinamik	•	•	•
Uyumlu Tam Direksiyonalite	•	•	•
Sabit Direksiyonalite	•	•	•
Sabit Omni	•	•	•
Omni Direksiyonel	•	•	-
True Directionality Plus	•	•	-
Kişiselleştirme			
Kişiselleştirme	•	•	•
Uygulama Bantları	24	20	18
Program Seçenekleri/Hafızaları	13/4	12/4	12/4
Music Experience	•	•	•
Çift taraflı İletişim: Ses kontrolü, program değiştirme	•	•	•
Otomatik Adaptasyon Yönetimi	•	•	•
Geçiş	4 Seçenek	3 Seçenek	2 Seçenek
Veri kaydı	•	•	•
Sohbet Verisi	•	•	•
Konuşma bildirimleri	•	•	•
Tinnitus SoundSupport	•	•	•
CROS uyumluluk	•	•	•

Aligo XT MNR T, Oasis^{next} 2023.1 ve üstü ile programlanabilir

Çalışma Koşulları

Sıcaklık: +1°C ile +40°C (34°F ile 104°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Saklama ve taşıma koşulları

Sıcaklık ve nem, taşıma ve depolama sürecinde aşağıdaki sınırları uzun süreler için aşmamalıdır.

Taşıma

Sıcaklığı: -25°C ile +60°C (-13°F ile 140°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Saklama

Sıcaklığı: -25°C ile +60°C (-13°F ile 140°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

IP68