

Ürün Bilgisi

Coral 3|1 BTE 105




Coral BTE 105 hafif dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Ses seviyesi ve program değişimi için çift basmalı düğme, telecoil, 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy ve NFMI

teknolojisi içerir. Coral BTE 105 ses boynuzu ile sunulur ve çeşitli kişisel kalıplar ve kubbelerle birlikte kullanılmak için miniFit ince hortum sistemi ile uyumludur.



Made for
iPhone | iPad | iPod

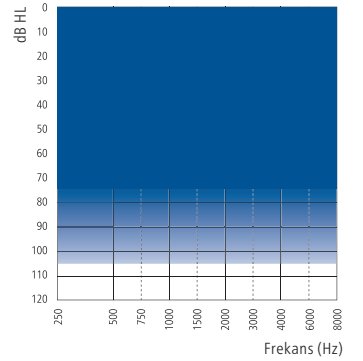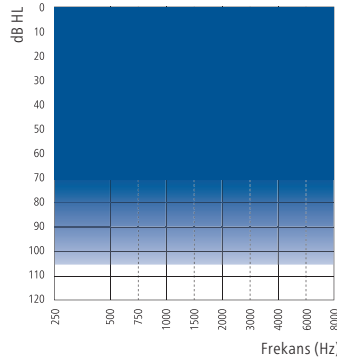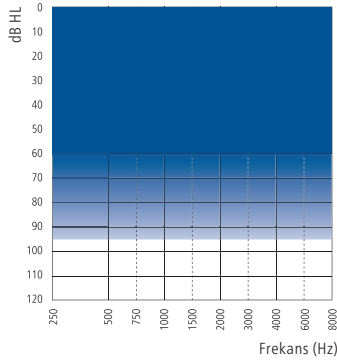

Teknik Özellikler

- 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy
- NFMI (yakın alan manyetik indüksiyon)
- 13 numara pıl
- Çift basma düğmesi
- Telecoil
- miniFit ince hortum
- Hidrofobik kaplama
- IP68 onaylı

Aksesuarlar

- RemoteLink app (iOS ve Android™ için)
- RC-A (uzaktan kumanda)
- TV-A (TV adaptörü)
- SoundClip-A
- Doğrudan Ses Girişi (DAI) adaptörü
- FM Adaptörü

Genel Özellikler

- Dijital Programlanabilir
- Otomatik veya manuel ses kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Güç Çıkışı
- GC-Kazanç kontrolü
- AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- Gürültü azaltıcı
- Feedback yönetimi
- Çift Mikrofon
- FM Uyumlu
- 4 Program

Aygıt iOS 9.3 veya daha güncel bir sürümle çalışmalıdır. Uyumluluk hakkında bilgi için, lütfen ziyaret edin: www.sbohearing.com/compatibility.



Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, iPod, iPod touch ve Apple Watch Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Demant A/S tarafından kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.

CORAL 3|I BTE I05



— Boynuz
— İnce hortum 1.3 mm
- - - İnce hortum 0.9 mm

2CC COUPLER

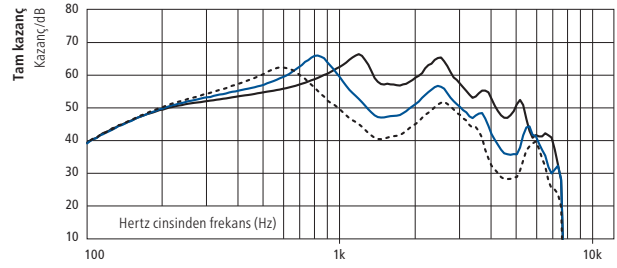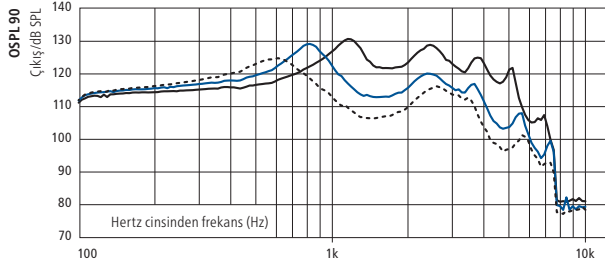

	BOYNUZ	İNCE HORTUM 1.3	İNCE HORTUM 0.9
OSPL90, Pik (dB SPL)	131	129	125
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	122	113	107
OSPL90, HFA (dB SPL)	126	119	112
Tam kazanç, Pik (dB)	66	66	62
Tam kazanç, 1600 Hz (dB)	57	47	41
Tam Kazanç, HFA (dB)	62	54	47
Referans Test Kazancı (dB)	50	43	36
Durağan akım (mA)	1,6	1,6	1,6
Çalışma akımı (mA)	1,9	2,0	2,0
Pil Numarası	13	13	13
Bozulma 500/800/1600 Hz (%)	<4/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekans aralığı (Hz)	100-5800	100-6700	100-6700
Eşdeğer Giriş Gürültüsü ¹⁾ (dB SPL)	14	18	22
Telecoil 1 mA/m 1000 Hz, IEC (dB SPL)	91	—	—
Telecoil HFA SPLITS (dB SPL)	106	100	93

KULAK SİMÜLATÖRÜ

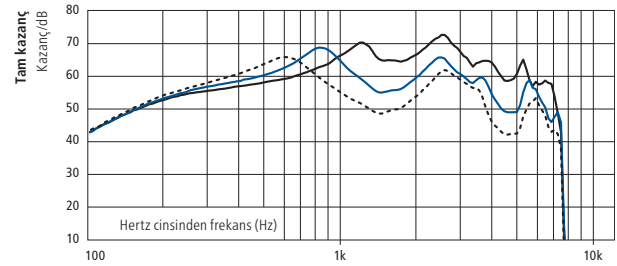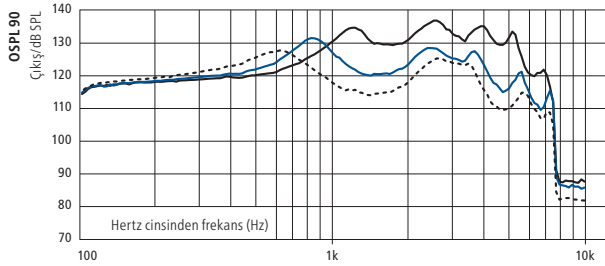

	BOYNUZ	İNCE HORTUM 1.3	İNCE HORTUM 0.9
OSPL90, Pik (dB SPL)	138*	132*	128
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	130	121	115
OSPL90, HFA (dB SPL)	133	126	120
Tam kazanç, Pik (dB)	73	69	66
Tam kazanç, 1600 Hz (dB)	65	56	50
Tam Kazanç, HFA (dB)	68	62	55
Referans Test Kazancı (dB)	56	47	41
Durağan akım (mA)	1,6	1,5	1,5
Çalışma akımı (mA)	1,7	1,6	1,6
Pil Numarası	13	13	13
Bozulma 500/800/1600 Hz (%)	<7/<4/<2	<3/<2/<2	<2/<2/<2
Frekans aralığı (Hz)	140 – 7290	100 – 7500	100 – 7500
Eşdeğer Giriş Gürültüsü ¹⁾ (dB SPL)	18	24	25
Telecoil 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	96	—	—
Telecoil HFA SPLITS (dB SPL)	—	—	—

Teknik veriler geniş kapsamlı olarak, test kutusu ölçüm ayarlarına göre ölçülmüştür.

IEC 60318-5:2006 'ya uygun bir "2cc" coupler'e göredir. "Kulak simülatörü", IEC 60318-4:2010'ya uygun bir coupler'e göredir.

Uygulanan sürümler: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015

Tam kazanç, işitme cihazın kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20dB ayarına göre ve 70dB'lik bir SPL girdisiyle ölçülmüştür.

Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadan örneğin; IEC 60118-0+A1:1994'den tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.

Cihaz dağıtıcısı için uyarı

İşitme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC 60318-4).

* İşitme cihazı kullanıcısının kalan işitme duyusunu bozma riski olabileceğinden, cihazın seçiminde ve takılmasında özel dikkat gösterilmelidir.

ÖZELLİKLER

	CORAL 3	CORAL 1
Dynamic Noise Management™		
Dinamik Direksiyonalite	Hafif odaklanma	Hafif odaklanma
Dinamik Gürültü Azaltma	●	●
Dynamic Speech Processing™		
ChannelFree™	●	●
Speech Cue Priority™	●	●
Dynamic Feedback Canceller™	●	●
Konuşma		
Alçak Frekans Artırıcısı	●	●
Frequency Composition™	●	—
KONFOR		
Geçici Gürültü Azaltma	●	—
Rüzgar Gürültüsü Yöneticisi	●	●
Hafif Gürültü Yönetimi	●	●
İŞLEME		
Frekans Aralığı	8 kHz	8 kHz
Uygulama Bantları	10	8
DIREKSİYONALİTE KONTROLLERİ		
Sabit Dir	●	●
Sabit Omni	●	●
KİŞİSELLEŞTİRME		
Program Seçenekleri/Hafızada	6/4	6/4
Çift taraflı Koordinasyon: Ses kontrolü, Program değiştirme, Sessiz konum	●	●
Otomatik Adaptasyon Yöneticisi	●	●
Veri kaydı	●	●
Tinnitus SoundSupport	●	●

Coral B 105, Oasis^{next} 2020.1 veya daha üst sürümüyle programlanabilir.

Çalışma koşulları

- Sıcaklık: +1°C - +40°C (+34 °F - +104 °F)
- Nem: %5 ila %93, bağıl nem, yoğunlaşmaz
- Atmosferik basınç: 700 hPa - 1060 hPa

Saklama ve Taşıma Koşulları

Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır:

- Sıcaklık: -25°C - +60°C (-13 °F - +140 °F)
- Nem: %5 ila %93, bağıl nem, yoğunlaşmaz
- Atmosferik basınç: 700 hPa - 1060 hPa

IP68